

CuroCell Cirrus[®] 2.0



Sistema de atención de terapia del dolor
y alivio de la presión

CuroCell Cirrus® 2.0

CuroCell Cirrus® 2.0 se emplea como asistencia para la prevención y el tratamiento de las úlceras de decúbito de hasta la categoría 4 (0-180 kg) y la categoría 2 (181-230 kg) ⁽¹⁾, así como para la terapia del dolor. Se trata de un sistema de sustitución perfecto para todos los entornos sanitarios.

CuroCell Cirrus® 2.0 combina el aire con una superficie de espuma suave y proporciona al usuario un alto confort y una redistribución de la presión ⁽²⁾. El exclusivo proceso alterno en forma de onda se adapta especialmente bien a la terapia del dolor. La función añadida del talón ofrece una protección aún

mejor, al aliviar la presión que se ejerce sobre los talones.

La bomba del colchón CuroCell Cirrus®, silenciosa y fácil de utilizar, que incluye cuatro configuraciones distintas (alterna, estática, alterna + inflado del asiento y estática + inflado del asiento), hace que este colchón sea muy funcional para todos los grupos de pacientes.

Además, el sistema con cubierta dual reduce el efecto del roce, incluso cuando se está ajustando la cama.



Los colchones de Care of Sweden se entregan con una cubierta exterior higiénica extensible en cuatro direcciones que cumple las normas aplicables de higiene⁽³⁾, calidad y seguridad. Todas las cubiertas están fabricadas en materiales modernos y reciclables y son permeables al vapor⁽⁴⁾ lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

Especificaciones

Tipo: Colchón con alternancia de presión

Altura: 21 cm

Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 4, inclusive

Peso de usuario recomendado: 0-180 kg (cat. 4) y 180-230 kg (cat. 2)


Incendio: EN 597-1, -2

Alimentación: 230 V/50 Hz

Nivel de ruido de la bomba: <25 dBA

Garantía: 2 años

Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en secadora.

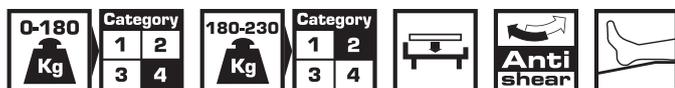

Prestaciones y características

- Presión alterna en la superficie de espuma suave
- Bomba digital fácil de utilizar
- Manejo y limpieza sencillos
- Inclinación para el talón, para aliviar la presión de los talones
- Cubierta higiénica con costuras soldadas
- Desinflado rápido del colchón máximo 10 segundos. Tiempo máximo de inflado 20 min.
- Bomba silenciosa y energéticamente eficiente
- Cubierta higiénica suave, elástica y permeable al vapor ⁽⁴⁾
- Alarma sonora y luminosa de presión baja
- Alarma sonora y luminosa de interrupción de la alimentación
- Función estática con vuelta automática
- Transportable
- Sistema desinflado máximo 10 segundos e inflado máximo 20 minutos
- Autonomía mínima 2h. Autonomía máxima 5h.
- Baja presión continua, vuelve automáticamente al modo de alternancia después de 20 minutos

Medidas

80/85/90/105/120x200 cm y 80/85/90x210 cm.

En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

Opcional • Bolsa duradera • Cubierta de baja fricción

Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009.

(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios - Penetración de bacterias - Humedad".

(4) SS-EN ISO 15496.



Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.

Care of Sweden y CuroCell Cirrus son marcas comerciales de Care of Sweden AB.

© Care of Sweden AB, 2015. Todos los derechos reservados.

Última actualización: 2015-06-23.



Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.



Lea el código QR para ver el vídeo de instrucciones.

 care of sweden
Supporting Life

www.careofsweden.com



C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

Distribuidor: